

VisiClear®

Evacuador quirúrgico de humos



Modos de funcionamiento en la intervención

Puede seleccionar fácilmente uno de los tres modos de funcionamiento (modo Laparoscópico, Tubo abierto y Bisturí electroquirúrgico), personalizando de forma automática la duración del filtro según la intervención quirúrgica.

Diseño avanzado de control de sonido

Whisper Technology™ garantiza un funcionamiento muy silencioso con una calidad de sonido sin precedentes.

Diseño elegante para apilar

Diseñado ergonómicamente para poder apilarlo.

Advertencia de oclusión

Función de seguridad que alerta al personal médico cuando ha ocurrido una oclusión.

Pantalla táctil con colores intuitivos

Fácil de usar, requiere una formación mínima y puede manejarse con la mano enguantada.

Cierre deslizante único del puerto

SafePort Technology™ minimiza el riesgo de que el personal entre en contacto con un puerto contaminado.



VisiClear®

Evacuador quirúrgico de humos

VisiClear® es nuestra oferta más avanzada de cuidado de agudos para la evacuación de humo quirúrgico. Al combinar Safeport Technology™, una advertencia de oclusión, seguimiento de la duración del filtro y modos de intervención programables con un toque para procedimientos con tubo abierto, con bisturí electroquirúrgico y laparoscópicos, VisiClear captura y filtra con eficacia humo quirúrgico, elimina olores, partículas y otros subproductos que pueden ser peligrosos.



Información técnica

Niveles de ruido (valores nominales)
con un consumo mínimo < 43 dBA
con un consumo máximo < 55 dBA

Dimensiones (Al x An x P)
7,1 in x 13,9 in x 16,1 in
18,0 cm x 35,4 cm x 40,9 cm

Velocidades de flujo
30 cfm (839 lpm) utilizando un tubo de
7/8 in (22 mm)

Peso
Con filtro instalado 17,5 lbs (7,9 kg)
Sin filtro instalado: 14,5 lbs (6,6 kg)

Aspiración estática
150 mmHg de vacío

Certificaciones
UL, cUI, CE

Garantía
Garantía completa de (3) años

Información de pedidos de productos


Descripción	Número de catálogo	Cantidad
VisiClear® (sistemas de 100/120 voltios) Incluye un filtro y un pedal	VC120	1/cada
VisiClear® (sistemas de 200/240 voltios) Incluye un filtro y un pedal	VC220	1/cada
VisiClear® (sistemas de 100/120 voltios) Incluye un pedal	VC120 NF	1/cada
VisiClear® (sistemas de 200/240 voltios) Incluye un pedal	VC220 NF	1/cada
EZLink® Dispositivo de activación automática: puede utilizarse para encender o apagar el evacuador de forma remota, para que el filtro dure más.	EZLINK01	1/estuche
Colector de líquido ViroSafe® Diseñado para captar líquidos y ayudar a mantener la integridad del sistema de filtrado para que dure el filtro.	VSFT10	10/ estuche
Filtro ViroSafe® VisiClear® Safeport Technology™ evita que el médico toque accidentalmente un puerto expuesto cuando no se utiliza.	VS135 VS1352 VS1354	1/estuche 2/estuche 4/estuche

Accesorios

(cada uno se vende por separado)



EZLink®

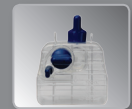

Colector de líquido
ViroSafe®

